


# Stryker Prime X Röntgen-Stretcher

Bildqualität.  
Zugang.  
Mobilität.

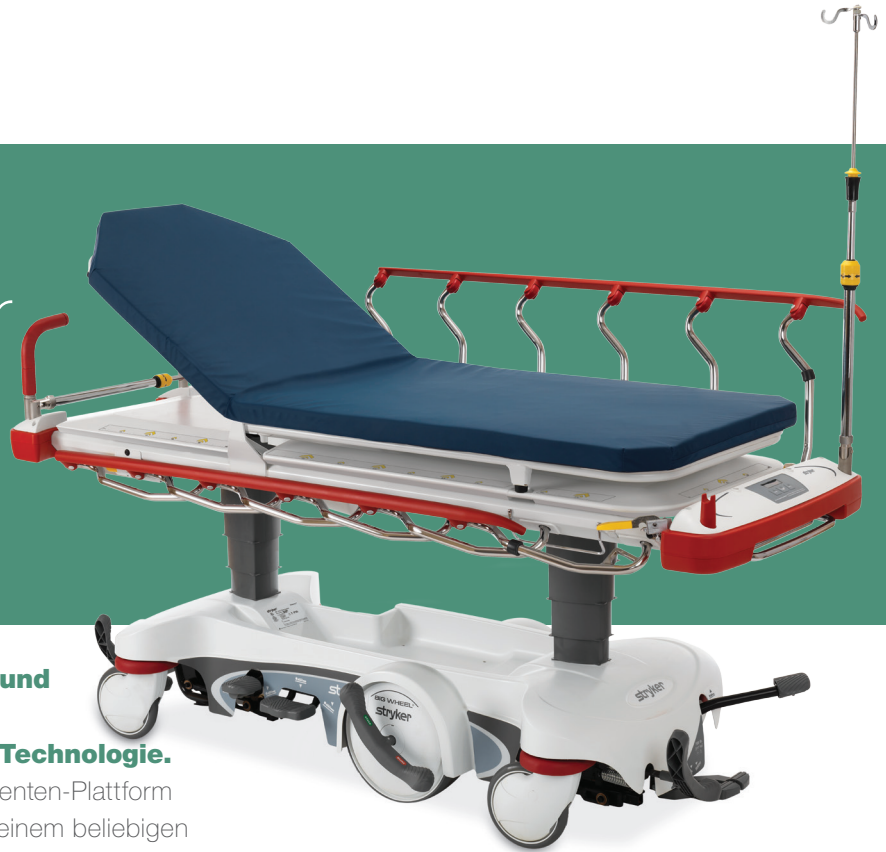

## Stryker Prime X bietet die Sicherheit und Effizienz der Stryker Prime Stretcher-Serie – jetzt mit ClearView-Technologie.

Das einzigartige Doppeldeck-Design der Patienten-Plattform ermöglicht die Platzierung von Kassetten an einem beliebigen Punkt unter dem Patienten. Die offene Architektur lässt praktisch jede Kassettengröße zu. Dank dieser vielseitigen Lösung, bei der eine mobile Plattform mit überlegener Bildqualität kombiniert wird, kann das medizinische Fachpersonal im gesamten Krankenhaus eine herausragende Patientenversorgung gewährleisten.



**Die ClearView-Technologie in Verbindung mit dem Doppeldeck-Design bietet die Bildqualität, die Sie von einem mobilen Röntgentisch erwarten.**



**Prime X ist mit modernsten Mobilitätsfunktionen ausgestattet, z. B. dem Big Wheel, das die erforderliche Schiebekraft verringert und die Manövrierbarkeit verbessert, oder dem Zoom-motorisierten Antriebssystem\*, das ein manuelles Schieben praktisch überflüssig macht.**



**Prime X ermöglicht den Zugang von allen Seiten, sodass die Kassette schnell und einfach für Ganzkörperaufnahmen platziert werden kann.**

**Doppeldeck-Design** – ermöglicht das Ausrichten der Kassette auf den Patienten.

**Offene Architektur** – lässt praktisch jede Kassettengröße zu.

**Abgeschrägte Kanten und visuelle Ausrichtungsmarkierungen auf der Kassettenplattform** – ermöglichen eine schnelle und einfache Platzierung der Kassette.

**Elektrische Höhenverstellung** – erleichtert durch Betätigen des Fußpedals das Hochfahren oder Absenken des Stretchers.

**318 kg Gewichtskapazität** – auch für schwerere Patienten geeignet.

**Getrennte Rückenlehnen- und Fußbereiche** – erleichtern die Reinigung des Doppeldecks durch den Rundum-Zugang.

**Glideaway-Seitengitter** – bieten eine hervorragende Absicherung und lassen sich geschickt unter der Liegefläche verstauen, wenn sie nicht benötigt werden oder wenn Aufnahmen von der Seite gemacht werden müssen.

\*510(k)-Genehmigung durch die FDA steht noch aus, noch nicht erhältlich

# Stryker Prime X Röntgen-Stretcher

Stryker GmbH & Co. KG  
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1  
47228 Duisburg  
Deutschland  
t: +49 2065 837-0  
f: +49 2065 837-837  
www.stryker.de

Stryker GmbH  
Euro Plaza, Gebäude G  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich  
t: +43 1 813 2000  
f: +43 1 813 1616  
www.stryker.at

Stryker Osteonics SA  
Dr. Homer Stryker Strasse 1  
2545 Selzach  
Schweiz/Suisse  
t: +41 32 641 6-950  
f: +41 32 641 6-955  
www.stryker.ch



1105X

## Standardfunktionen

- ClearView-Technologie
- Thermogeformte ABS-Basis mit extra Staufach
- 318 kg Gewichtskapazität
- 76 cm breite Patientenliegefläche mit 8-cm-Komfortmatratze
- An der Liegefläche montierte Sauerstoffflaschenhalterung
- Integriertes Transferbrett
- Hochreinigungsfähiges Design (nur 1105X und 1115X)
- Zentral gesteuertes Bremssystem an vier Laufrollen mit Aktivatoren an beiden Enden
- Auf zwei Seiten montierte Fußsteuerungshydraulik mit Einzelpedal zur Absenkung/Pedal zur Absenkung
- Glideaway-Seitengitter mit integrierten Griffen am Fußende zum Schieben/Ziehen
- Vier integrierte Infusionsständerhalterungen
- +/- Trendelenburg
- Omni Surface-Laufrollen (20 cm) mit integrierten Radkappen
- Pneumatische Rückenlehne/festes Fußteil
- Hydraulik für gleichmäßiges Absenken
- Bremsen/Lenkung an Kopf- und Fußende
- 2 Jahre Garantie

### 1105X: Alle Standardfunktionen plus

- Lenkung mit fünftem Rad

### 1115X: Alle Standardfunktionen plus

- Big Wheel-Lenkung

### 1125X: Alle Standardfunktionen plus

- Zoom-motorisiertes Antriebssystem [510(k)-Genehmigung durch die FDA steht noch aus, nicht in den USA erhältlich]

## Optionale Funktionen

- Komfortmatratze, 10 cm
- Ultrakomfortmatratze, 10 cm
- Bremsen und Lenkung auf allen vier Seiten (nur 1105X und 1115X)
- Hochklappbare Schiebegriffe (nur 1105X und 1115X)
- Dreiseitige Hydrauliksteuerungen am Kopfende (nur 1105X und 1115X)



1115X

## Technische Daten

Modellnummer

1105X (Prime X mit fünftem Rad)\*  
1115X (Prime X mit Big Wheel)\*  
1125X (Prime X mit Zoom-Antrieb)\*

Gesamtlänge

(1105X und 1115X) 216 cm  
(1125X) 218 cm

Gesamtbreite

Seitengitter oben 96,5 cm  
Seitengitter unten (1105X und 1115X) 77,5 cm  
Seitengitter unten (1125X) 78,7 cm

Patientenliegefläche

76 x 191 cm

Gewichtskapazität

318 kg

Höhenverstellung

Hoch 94,6 cm  
Tief (1105X und 1115X) 61 cm  
Tief (1125X) 66,68 cm

Positionierung der Liegefläche

Rückenlehne 0°-90°  
Fußteil 0°-40°  
Trend-/Umgekehrte Trend. (1105X und 1115X) ±17°  
Trend-/Umgekehrte Trend. (1125X) ±16°

Seitengitter

36 x 147 cm

Laufrollendurchmesser

20 cm

EMV

IEC 60601-1-2

## Herstellergarantie

Zwei Jahre inkl. Ersatzteile, Arbeits- und Anfahrtskosten

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

- Dreiseitige Hydrauliksteuerungen am Fußende (nur 1105X und 1115X)
- Hydrauliksteuerungen auf vier Seiten
- Defibrillatortablett
- Defibrillatortablett/Fußendenverlängerung/Schreibunterlage
- Seitengitterentriegelung an Kopf- und Fußende

- Fußstütze/Dokumentenhalterung
- Infusionsstativ-Caddy
- Infusionsstativhalterungen (fest montiert, zwei- oder dreimal einklappbar)
- Serviertablett
- Serviertabletthalter/Fußstütze
- Seitengitterpolster

- Vertikaler Sauerstoffflaschenhalter
- Haltegurte
- Motorbetriebene Höhenverstellung (nur 1105X und 1115X)
- Schiebegriffe am Fußende (nur 1105X)
- Kassettenhalterung für aufrechte Thorax-Aufnahmen
- Kassettenhalterung für seitliche Halswirbelsäulenaufnahmen

### Dieses Dokument ist nur für medizinisches Fachpersonal bestimmt.

Dem behandelnden Arzt obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt gründliche Produktschulungen vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten den regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken: **Stryker, Big Wheel, ClearView, Prime X und Zoom**. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer. Die obigen Produkte tragen eine CE-Kennzeichnung gemäß der Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG.



Literaturnummer: MTX626121311DE Rev B  
MTX-RRD/GS 01/13  
Copyright © 2013 Stryker

